



耳模



聽障學生所佩戴的助聽器，除須有性能良好的機件外，還要配備一個合適的耳模，才能將擴大的聲音有效地輸送至耳內，發揮其最大的功能。



耳模的種類


不同材料可製成不同硬度及款式的耳模，聽力學家會視乎學生的聽障程度及個別情況作出建議。一般而言，硬性及半軟性耳模適合輕度至中度嚴重聽障的學生；至於嚴重至深度聽障的學生，則佩戴全軟性耳模較為適合。

款式	殼式、耳道式、半殼式、耳骨式等
硬度	硬性、全軟性及半軟性


理想的耳模

- 能固定助聽器的位置。
- 容易獲佩戴者接受。
- 能將聲音清晰地傳入耳內。
- 能長時間佩戴而沒有不適的感覺。
- 佩戴後不會產生尖銳的回音。
- 能適當地調節整體的輸出量和頻率反應。

除戴耳模的方法

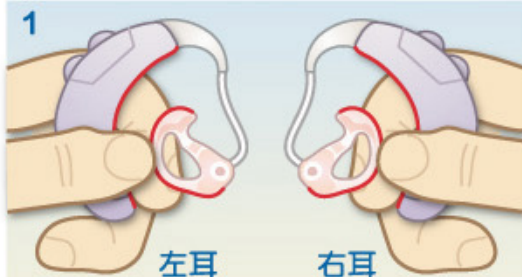


關上助聽器，把耳模正確地套上助聽器，並留意兩者的彎位是否配合。

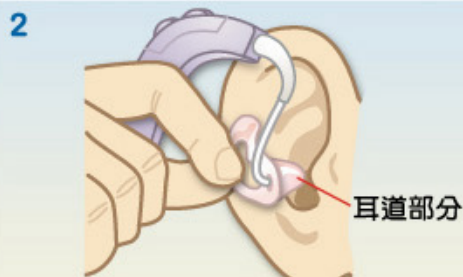

用大姆指及食指拿著耳模，把耳模放近耳旁，耳道部分向著耳朵。

3

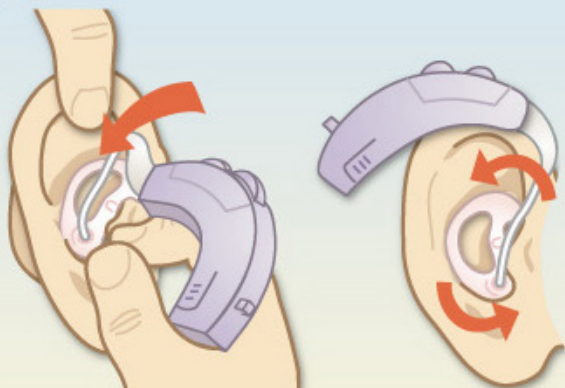

把耳模的耳道部分先放進耳內，輕輕向後轉動至正確位置。如有困難，可用另一隻手協助，把耳廓向上及向後拉。

4



把助聽器放在耳後，切勿扭曲膠管。

5



輕按耳模，使它完全置於耳窩內。

6



開啟助聽器後，如出現回音或感到不適，應重複試戴。如沒有改善，應請教有關的專業人士。

開

7



關

如須除下助聽器，應先把它關掉。

8



用手指夾著耳模，輕輕拉出。

如何幫助學生正確地使用耳模？

可教導學生：

- 分辨左右耳模
- 學習除戴耳模
- 學習清洗耳模

在下列情形發生時，宜通知家長尋求協助：

- 佩戴位置正確，但仍感到疼痛或不適。
- 佩戴位置正確，但產生尖銳的回音。
- 耳朵出現過敏反應。
- 膠管變黃和變硬。
- 耳道內的耳垢無法清除。
- 耳模鬆脫。
- 耳模的質料變異、破損或變色。

耳模的保養

- 每天檢查耳模，用軟布或紙巾把耳模抹淨。
- 檢查耳管是否堵塞。
- 每星期最少用微暖的肥皂水清洗耳模一次。

清洗前：必須把耳模及助聽器分開，切勿沾濕助聽器。

清洗後：把耳模完全抹乾，確保耳管內沒有水珠，才套上助聽器。

- 把耳模套回助聽器時，留意兩者的彎位是否配合。



香港特別行政區政府
教育局

出版

聽覺服務分組

九龍塘沙福道19號

教育局九龍塘教育服務中心西座2樓242室

電話：3698 3909 傳真：2762 2293

新界葵涌麗祖路77號

下葵涌特殊教育服務中心5樓548室

電話：2307 5071 傳真：2744 5315